



BagMixer®

产品目录

科学实验室设备

interscience

微生物行业的世界领头羊

2 Gravimat[®]
重量稀释器
性能优异、结果精确



1 BagSystem[®]
倾倒式均质袋
安全性分析



微生物样品制备和分析

3 BagMixer[®]
实验室均质仪
最理想的样品萃取手段



4 BagTools[®]
实验室工具
操作简单、方便



5 Spiral[®] DS+
快速细菌接种
一种快捷、方便、经济的方法



6 Scan[®]
自动菌群计数仪
高科技分析



interscience 是一家科技集团公司。

以上产品由 interscience 自主开发,设计,制造。并通过 ISO 9001-2000 标准及CE, ROHS 和 WEEE欧洲认证。



在25年里，interscience公司一直致力于微生物学领域内固态样品的制备与分析，同时研发和制造相关产品。公司每年以总收入的15%投入到研发领域，这使我们能够持续、稳定地向全球市场提供一种优质服务：微生物学领域内固态样品的制备与分析。公司的研发部门和制造车间位于法国中心地带，奥弗涅。迄今为止，interscience 向全球80多个国家提供产品与服务，公司每年 75% 的总收入来自海外市场。我们的产品备受客户的青睐。



BagMixer®拍击式均质器为我公司于1995年投放到市场的一款优质产品，获得用户的广泛认可和赞誉。在当前的全球市场中，它是众多产品中性能最为优异的一款高品质均质器。通过与BagFilter®过滤袋配合使用，可以保证用户获得一个最为理想的分析结果。长久以来，interscience公司一直以能够向市场提供整套全系列的微生物实验室设备而倍感自豪，我们的奋斗目标是帮助客户实现高效、安全的方式完成微生物实验室操作任务。interscience 不断向市场扩充新款均质器，同时也努力扩充配套过滤袋的型号和种类。目前，新款 BagMixer® 400 CC 均质器已经应用了 interscience 公司独创的“拍击与清理系统”。新款Scan®菌群计数器可以保证用户获得一个其它产品无法相比的高性能水准。

公司建设了一个全新的网站（即www.interscience.fr），您可以通过这个网站获得更为详尽的产品与服务内容，同时了解我公司的最新发展情况。作为一间年青，富有活力与朝气的公司，interscience参加了世界上所有规模巨大的展会，它始终为其产品与服务提供最为有力的支持，并不间断地向全球各地用户提供相关服务。公司一直致力于向全球用户提供产品、服务与支持，保证他们能够获得一个最为愉悦的体验。

François Jalenques
首席执行官

Emmanuel Jalenques
首席运营官

产品概要

Gravimat® 重量稀释器

Gravimat® 全自动 重量 稀释器	4
BabyGravimat® 全自动 重量 稀释器	5

BagMixer® 实验室均质器

BagMixer® 拍击式均质器产品	6
BagMixer® 400 CC® 均质器	7
BagMixer® 400 均质器系列	8
BagMixer® 型均质器	9
BagMixer® 100 MiniMix® 型均质器	10
BagMixer® 3500 JumboMix® 均质器	11

BagSystem® 均质器专用袋

BagFilter®, 带有侧边过滤膜的均质器专用袋	12
BagPage®, 带有全表面过滤膜的均质器专用	13
BagLight®, 平面均质袋	14
RollBag®, 取样均质袋	15
量身订做	15

BagTools® 实验室工具

BagOpen®, BagPipet®, BagTips®	16
BagRack®, BagClip®, PetriPile®	17

Spiral® System 快速细菌接种

Spiral® DS+ 型全自动快速螺旋接种仪	18
-------------------------------	----

菌落计数器

Scan® 500, Scan® 1200	20
-----------------------------	----

灭菌全系列产

Clinet® 101, 202, 303, 404	22
Anabac®	23

技术说明	24
产品规格	26
帮助	30
如何订购公司产品	31

Gravimat®

重量稀释器

Gravimat® 使用适量溶剂稀释固体样品，可在屏幕上选择任何实验室用稀释和分注方法。常用的稀释程序会被自动应用于之后的稀释操作中。

产品应用领域

È
È
È
È

产品性能优异、
具有可追溯性

产品规格

È <20 /250毫升
有推进器：<10 /250毫升
È 1/2 至 1/999
È >1克）：
<0.05克
99%进将大量液体分配完毕
È
称重平台：精确度为0.05克
液体分配：精确度为0.1克
È
意大利语、日语、汉语.....

È RS232型打印输出或LIMS输出（打印数据：
日期、计时、用户代码、泵系统选择
（单泵或双泵）、样品编号、样品重量、总重、
稀 释倍数、稀释精确度等等）
È 2500克
È



视频演示网站
www.interscience.fr

产品组件：单泵或双泵 / 每个泵配备二套耐高压加热分配组件 / 一个BagOpen®开袋器 / 一个圆形称重平台 / 一个容量为5公升的灭菌瓶 / 一个BagFilter®型过滤器样品包。

技术规范（说明）

Gavimat®	单泵	双泵
最大称重	2500克	2500克
电源	220/110伏 - 50/60赫兹	220/110伏 - 50/60赫兹
尺寸（长x宽x高）	42x31x32厘米	42x37x32厘米
产品重量	11公斤	13公斤
产品编号	510 230	512 230

可选配件



推进器®
产品编号：511 000



打印机
产品编号：521 000
(RS232打印输出)



条码阅读器
产品编号：522 000



袋子支架
产品编号：513 013

- ✓ 快速、可靠、标准组件
- ✓ 完全的可追溯性：与 LIMS、打印机和条形码完全兼容
- ✓ 称重与分配系统
- ✓ 多语言操作面板
- ✓ 清洗简单

BabyGravimat®

重量稀释器

BabyGravimat®型重量稀释器是在高标准的Gravimat®技术基础上研发出来的一款产品，您只需轻按机器上的二个按键即可轻松、快捷地完成任何种类样品的稀释工作。由于机器的臂架可以调节，因此 BabyGravimat® 全自动重量稀释器能够与任何型号的容器兼容，并允许用户同时使用二种稀释剂。

产品应用领域

È
È
È

操作简单/准确

产品规格

È <20秒/250毫升
È 1/2 至 1/99
È >1
È <0.1克
È >99%将大量液体分配完毕
È 0.1

È RS232型打印输出或LIMS输出（打印数据：日期、计时、用户代码、泵系统选择（单泵或双泵）、样品编号、样品重量、总重、稀释倍数、稀释精确度等等）
È 1000克
È



视频演示网站

www.interscience.fr

产品组件：单泵或双泵/每个泵配备二套耐高压加热分配组件/一个BagOpen®型开袋器/一个BagFilter®型过滤器样品包。

技术规范（说明）

BabyGavimat®	单泵	双泵
最大称重	1000克	1000克
电源	220/110伏 - 50/60赫兹	220/110伏 50/60赫兹
尺寸（长x宽x高）	36x31x49厘米	36x37x49厘米
产品重量	8公斤	9公斤
产品编号	500 230	502 230

可选配件



打印机
产品编号：521 000
(RS232打印输出)



可调节臂架
产品编号：513 014



袋子支架
产品编号：513 013

- ✓ 结构紧凑
- ✓ 操作简单：仅按二键即可稀释
- ✓ 具有分配与称重功能
- ✓ 与任何型号的容器兼容
- ✓ 清洗简单

BagMixer®

拍击式均质器（带有可调节的拍击叶片）全系列产品



BagMixer® 100 MiniMix®



BagMixer® 400



BagMixer® 3500 JumboMix®

BagMixer® 拍击式均质器是该领域内效能最高的一款实验室均质器，专门用于微生物实验分析。它能够保证对固体样品实现最为理想的细菌萃取。由于采用了公司独创的可调节的拍击叶片系统，机器内的均质腔能够与样品的特点达成完美的匹配。

安全可靠

- È 破损的可视窗，同时对减震器承诺终生质量保证



清洁

- È *
- È *
- È 270度




高性能

- È 力度*



通过国际专利认证

功能强大（最理想的萃取手段）

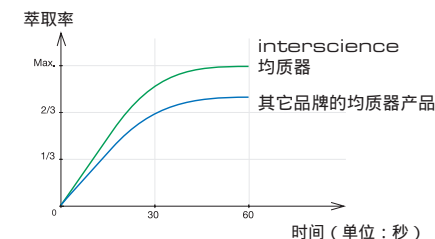

*视产品型号及实验条件而定



Click & Clean[®] 拍击与清洁系统

拍击与清洁系统允许用户全面接触均质器的机体：轻轻单击，移除叶片，对叶片进行高压消毒，清洗均质器内部。



通过国际专利认证


可调节的拍打式均质力度

根据样品的特点与尺寸调节均质器。



通过国际专利认证

数字化面板、易于控制

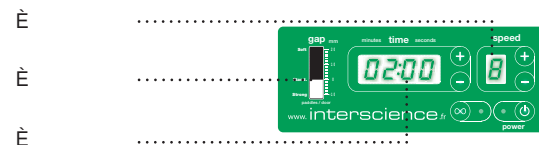

视频演示网站
www.interscience.fr

单击与清洁系统向用户提供了一个极为舒适的操作界面及无与伦比的均质质量。通过配备可自由移除且具备耐压耐热特性的叶片，用户可对机器内部的均质腔进行完全、无死角式的清洗。数字化面板则帮助用户对均质过程进行合理掌控。

BagMixer® 400 型均质器系列产品

作为该领域内全球最畅销产品，BagMixer® 400型均质器是一款功能强大、操作简单的实验室产品。通过配备一个过滤袋，用户无须担心会发生交叉传染之类的现象：拍打结果极其精确、可靠和迅捷。此款产品适合任何形式的操作，它是进行微生物实验分析的理想工具。

产品应用领域



BagMixer® 400 P
实验室必备产品

È (每秒8次的拍打速度)
 È (30秒至210秒，或开路运行)
 È CoolMix®型产品
 È /
 È 15摄氏度至零上80摄氏度)



BagMixer® 400 W
性能优异

È (每秒8次的拍打速度)
 È (30秒至210秒，或开路运行)
 È

最畅销产品



BagMixer® 400 VW
操作舒适、拍打精确

È (每秒6至9次的拍打速度)
 È (10秒至360秒，或开路运行)
 È (可调节的叶片)
 È



BagMixer® 400 CC®
Click & Clean® (轻轻单击，移除叶片)

È (每秒3至12次的拍打速度)
 È (1秒至1小时，或开路运行/倒计时)
 È
 È
 È



视频演示网站
www.interscience.fr

技术规范 (说明)

BagMixer® 400	P	W	VW	CC®
允许容量	50毫升至400毫升	50毫升至400毫升	50毫升至400毫升	50毫升至400毫升
电源	220/110伏 - 50/60赫兹	220/110伏 - 50/60赫兹	220/110伏 - 50/60赫兹	220/110伏 - 50/60赫兹
尺寸 (长x宽x高)	39x26x29厘米	39x26x29厘米	42x26x29厘米	42x26x26.5厘米
产品重量	16.5公斤	16.5公斤	16.5公斤	16.5公斤
产品编号	021 230	022 230	023 230	024 230

如欲获得最佳分析结果



BagLight®
400 毫升



BagFilter®
400 毫升



BagPage®
400 毫升

- ✓ 运行安静
- ✓ 最理想的萃取方法
- ✓ 不易破损的可视窗
- ✓ 对减震器承诺终生质量保证
- ✓ 全体不锈钢材质
- ✓ 可视窗门可旋转到270度
- ✓ 清洗简单

BagMixer® 型均质仪包

interscience公司郑重向您推荐这款符合您所有要求和标准的BagMixer®型均质仪包产品。
该产品已获得全球用户的青睐！



初用者包

1 BagMixer® 400 *

500 BagFilter® 型过滤袋 + 1000 BagLight®
+ 50 BagClip® 型夹袋器 + 1 BagOpen®
开袋器 + 1 BagRack® 支架



中级包

1 BagMixer® 400 *

500 BagFilter® 型过滤袋 + 1000 BagLight® 袋子
+ 50 BagClip® 型夹袋器 + 1 BagOpen® 开袋器
+ 1 BagRack® 支架 + 500 BagPage® 袋子
+ 1 PetriPile® + 1 BagPipet® + 1 Clinet® 101



高级包

1 BagMixer® 400 * + 1 BabyGravimat®

1000 BagFilter® 型过滤袋 + 2000 BagLight® 袋子
+ 50 BagClip® 型夹袋器 + 1 BagOpen® 开袋器
+ 2 BagRack® 支架 + 1000 BagPage® 袋子
+ 2 PetriPile® + 1 BagPipet® + 6 Clinet® 101

* 请选择以下任一款型号的BagMixer® 400型均质仪：BagMixer® 400P, BagMixer® 400W, BagMixer® 400VW或BagMixer® 400CC®。

MiniMix® 100

型均质器系列产品

MiniMix® 100型均质器主要用于拍打小尺寸的样品。
借助于可调节的叶片系统，您可以获得一个精确、高效的均质结果。

产品应用领域

È
È
È

È
È
È

DNA 检测



MiniMix® 100 VP
型均质仪

È
(每秒6至9次的拍打速度)
È
(10秒至360秒，或开路运行)
È
È CoolMix®型产品
È
/ 15摄氏度至零上80摄氏度)

新品



MiniMix® 100 CC®
Click & Clean® (轻轻单击，移除叶片)

È
È
È 6至9次的拍打速度)
È
(10秒至360秒，或开路运行)
È
È



视频演示网站
www.interscience.fr

技术规范 (说明)

MiniMix® 100	VP	CC®
允许容量	5毫升至80毫升	5毫升至80毫升
电源	220/110伏 - 50/60赫兹	220/110伏 - 50/60赫兹
尺寸 (长x宽x高)	35x20x20厘米	35x20x20厘米
产品重量	9公斤	13 公斤
产品编号	011 230	013 230

如欲获得最佳分析结果



BagPage®
80 毫升



BagLight®
100 毫升



BagPage®
100 毫升

- ✓ 运行安静
- ✓ 操作简单
- ✓ 最理想的萃取方法
- ✓ 不易破损的可视窗门
- ✓ 对减震器承诺终生质量保证
- ✓ 全体不锈钢材质
- ✓ 可视窗门可旋转到270度
- ✓ 清洗简单

型均质器系列产品

ÉÉÉÉ



È
 (每秒3至7次的拍打速度)
 È
 (30秒至210秒,或开路运行)
 È
 (可调节的叶片)



主
 主
 (每秒3至7次的拍打速度)
 主
 (30秒至210秒,或开路运行)
 主
 (可调节的叶片)
 主



È
 (温度从零上20摄氏度至零上50摄氏度)
 È
 (每秒3至7次的拍打速度)
 È
 (30秒至210秒, 或开路运行)
 È
 (可调节的叶片)
 È



如欲获得最佳分析结果

JumboMix® 3500	VP	VW	WarmMix®
允许容量	200毫升至3500毫升	200毫升至3500毫升	200毫升至3500毫升
电源	220/110伏 - 50/60赫兹	220/110伏 - 50/60赫兹	220/110伏 - 50/60赫兹
尺寸 (长x宽x高)	45x57x40厘米	45x57x40厘米	45x57x41厘米
产品重量	58公斤	58 公斤	58 公斤
产品编号	031 230	032 230	033 230



- ✓ 运行安静
- ✓ 可调节的叶片、最理想的萃取结果
- ✓ 不易破损的室窗
- ✓ 对减震器承诺终生质量保证
- ✓ 全不锈钢材质
- ✓ 可视窗门可旋转到270度
- ✓ 清洗简单

BagSystem®

BagSystem® 包括全系列产品,它主要对食品、农业、医药和环境样品实施安全和高效制备。如欲取得一次成功的分析结果,必须对样品进行隔离、均质和过滤。在全球众多公司中,唯有interscience公司的工厂同时制造实验室均质器和过滤袋二种产品。

使用BagFilter®过滤袋和BagMixer®均质器可保证用户获得一个安全的微生物分析结果。




开袋操作简单

1. 利用BagOpen®开袋器
可打开一个BagFilter®袋



配有集成过滤器袋

2. 将样品放入袋中,然
后再加入稀释剂

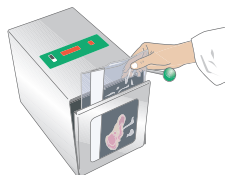

不会出现交叉传染现象

3. 在BagMixer®中对样
品进行拍打均质



即时实施无菌过滤

4. 将存储在滤膜后的已完成
过滤操作的样品取出。
准备对过滤后的样品进行分析



视频演示网站

www.interscience.fr

BagFilter®

带有侧边滤膜的袋子

侧边带有非编织型滤膜的无菌取样袋系列产品

É
(如地生肉、熟肉、鱼和海鲜食物进行分析等等)
É



BagFilter® P

É
É
É
É
É

<250微米

最畅销产品



吸取稀释剂



BagFilter® S

É
É
É
É
É

<250微米



倾倒稀释剂

技术规范 (说明)

BagFilter®	P 400	S 400	P 3500
公称容积	400毫升	400毫升	3500毫升
允许容量	50毫升至300毫升	50毫升至300毫升	200毫升至2000毫升
袋尺寸	190x300毫米	190x300毫米	380x510毫米
无菌包装数量	10个或25个	10个或25个	10个
盒数	500个	500个	100个
产品编号	111 410或111 425	112 410或112 425	113 510

- ✓ 即时过滤
- ✓ 极强的抵抗力
- ✓ 与任何一款实验室均质器均兼容
- ✓ 轻松将样品过滤至另一个容器内
- ✓ 完美匹配Spiral® DS+型螺旋接种仪和Scan®
- ✓ 无菌、与食品兼容

带有一层全表面过滤膜的无菌过滤袋系列产品。
公司独创的标记系统可帮助用户实现无差错吸取稀释液。

È
È
È

(如对奶酪、油酥面团、点心、水果和面粉等产品进行分析)

此款产品采用了interscience公司独创技术

Multilayer® : 带有加强型焊接点的加强型多层合成体

非编织类过滤器 :

微孔测定过滤器 : 可完美地实现一次精确的过滤操作



最畅销产品

BagPage®+ 微孔测定过滤器

È
È
È
È

280微米



新品

BagPage® F 款低孔率过滤器

È
È
È
È
È
È
È

(检测聚合酶链反应)


63微米



BagPage® R 款非编织类过滤器

È
È
È
È

<250微米

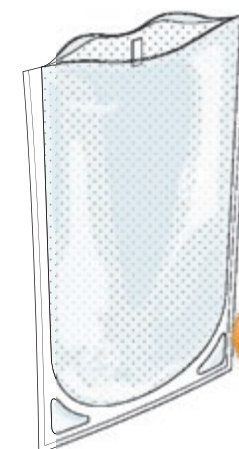

新品

BagPage® U 款圆底产品

È
È
È
È
È

280微米

技术规范 (说明)

BagPage®	80	100	+ 400	F 400	R 400	U 400	+ 3500
公称容积	80毫升	100毫升	400毫升	400毫升	400毫升	400毫升	3500毫升
允许容量	5毫升至40毫升	5毫升至50毫升	50毫升至300毫升	50毫升至300毫升	50毫升至300毫升	50毫升至300毫升	200毫升至2000毫升
袋尺寸	95x160毫米	95x180毫米	190x300毫米	190x300毫米	190x300毫米	190x300毫米	360x510毫米
无菌包装数量	25个	25个	10个或25个	25个	25个	25个	10个
盒数	500个	500个	500个	500个	500个	500个	100个
产品编号	120 825	121 025	122 010或122 025	122 325	161 025	122 225	123 010

- ✓ 即时过滤 ;
- ✓ 极强的抵抗力 ;
- ✓ 大开袋操作 , 便于处理样品 ;
- ✓ 方便吸取液体 ;
- ✓ 与任何一款实验室均质器均兼容 ;
- ✓ 完美匹配Spiral® DS+型螺旋接种仪和Scan®
- ✓ 无菌、与食品兼容



通过托盘订购上述产品可节约资金。

BagLight®

平底均质器专用袋

无菌平底均质仪专用袋系列产品

È

此款产品采用了interscience公司独创技术

PolySilk®：一款聚烯烃合成体，它对破裂和穿孔的抵抗力极强

高密度 PolySilk®：一款聚烯烃合成体，它对穿孔的抵抗力极强

Multilayer®：带有加强型焊接点的多层合成体



BagLight® PolySilk®
透明

È PolySilk®, 聚烯烃合成体
È



BagLight® HD PolySilk®
不透明

È PolySilk®
È
È



BagLight® Multilayer®
极强的抵抗力

È Multilayer®, 多层合成体
È
È



BagLight® Multilayer® U
圆底

È Multilayer®, 多层合成体
È
È

技术规范（说明）

BagLight®	PolySilk® 100	PolySilk® 400	HD PolySilk®	Multilayer®	Multilayer® U	PolySilk® 3500
公称容积	100毫升	400毫升	400毫升	400毫升	400毫升	3500毫升
允许容量	5毫升至50毫升	50毫升至300毫升	50毫升至300毫升	50毫升至300毫升	50毫升至300毫升	200毫升至3500毫升
袋尺寸	110x185毫米	175x300毫米	175x300毫米	190x300毫米	190x300毫米	380x510毫米
无菌包装数量	25个	25个	25个	25个	25个	25个
盒数	500个	1000个	1000个	500个	500个	500个
产品编号	131 025	132 025	132 325	132 225	132 125	133 025

- ✓ 结构坚固
- ✓ 极强的抵抗力
- ✓ 与任何一款实验室均质器均兼容
- ✓ 无菌、与食品兼容



通过托盘订购上述
产品可节约资金。

无菌取样袋袋口使用不锈钢丝铸造而成，并利用金属丝网密封，主要用于取样和均质。

取样均质器专用袋主要对液体或固体样品进行取样和均质操作：


•
•



RollBag®
型取样袋

• PolySilk®，聚烯烃合成体
•

在一个BagRack®中可轻松完成存储操作

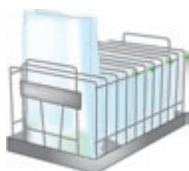

仅可进行竖直操作

在同一个袋中完成取样品和均质操作



技术规范（说明）

RollBag®	450	1300
公称容积	450毫升	1300毫升
允许容量	5毫升至50毫升	50毫升至300毫升
袋尺寸	110x230毫米	175x290毫米
盒数	1000个	500个
产品编号	145 010	145 040

- ✓ 袋衣上留有一个预切开口
- ✓ 标记区
- ✓ 紧密封存
- ✓ 至高可抵抗100摄氏度的高温
- ✓ 在一个BagRack®中可轻松完成存储操作
- ✓ 取样及均质袋
- ✓ 独立无菌包装

量身订做

可根据您的需求专门为您设计均质器专用袋。



请选择适合您的均质仪用袋：

- 外形
- 尺寸
- 材质
- 测定过滤器类型
- 焊接及开口
- 间隔室
- 定制标记
- 测定分离...

上述所有均质器专用袋均获得与食品接触的批准，且均为无菌型用袋。
每个盒子上均贴有一个红色的标签。
每批装运物资内装有一份无菌证明。



BagOpen®

开袋器/夹袋器

通过使用BagOpen®开袋器，用户可以很轻松地打开均质器专用袋，且在此过程中不会与样品有任何接触。另外，用户也可将BagOpen®作为一个支架，使均质仪用袋始终保持打开的状态。



稳定、结构坚固。

BagOpen®

适用几种类型均质仪用袋：80/100 毫升、400 毫升 及3500 毫升。

技术规范（说明）

BagOpen®	80/100毫升	400毫升	3500毫升
容积	80/100毫升	400毫升	3500毫升
产品编号	211 010	211 040	211 350

- ✓ 结构坚固
- ✓ 底座坚固、稳定
- ✓ 材质为不易破损的聚碳酸酯

BagPipet & Bagtips®

BagPipet®是一个可完全耐高压加热、固定容量的吸取器（0.1、0.9或1毫升）。通过与BagTips®（无菌、一次性硬质吸管）配合使用，BagPipet®型吸取器的尺寸足以帮助您达到取样品袋的底部。不存在加厚或浆状产品堵塞吸取器的风险。



BagPipet®

BagTips®



BagPipet®
和 BagTips®

根据《实验室优化管理细则》规定，此款产品符合耐高压加热和校准等要求。

BagTips®型吸管共有以下二种尺寸产品：
常用型（regular, 19厘米）和超大型（Jumbo, 24厘米）

技术规范（说明）

	BagPipet®	BagTips®(常用型)	BagTips®(超大型)
尺寸		190毫米	240毫米
产品编号	251 091	252 019	252 024

- ✓ 节约
- ✓ 无堵塞吸取器的风险
- ✓ 无污染的风险
- ✓ 校准、测定过程简单
- ✓ 一次性、即抛型吸管
- ✓ 耐高压加热

Bag Rack®

型可折叠存放架

Bag Rack®型可折叠存放架能够干净、有系统的存放各类用袋。通过使用 Bag Clip®型封口夹,用户可以很方便地打开或密封摆放在存放架上的各类用袋。



Bag Rack® 80/100毫升

Bag Rack® 400毫升
可选用安全滴水盘



Bag Rack® 型存放支架 3500毫升

 视频演示网站
www.interscience.fr

适用以下容积的均质仪用袋：80/100毫升、400毫升及3500毫升。

技术规范（说明）

Bag Rack®	80/100毫升	400毫升	3500毫升
产品编号	221 010	221 040	221 350

- ✓ 可折叠存放
- ✓ 耐高压加热
- ✓ 全体不锈钢材质

Bag Clip®

夹袋器

Bag Clip® 型夹袋器可暂时密封所有类型的袋子,以避免发生中间焊接的现象。由于采用了三点密封系统,用户可以迅捷地将袋口密封。该产品具备水密和气密等特点。

适用哪些容积的均质仪用袋：
80/100毫升、400毫升及3500毫升。



Bag Clip®



- ✓ 使用简单、实用性强
- ✓ 具备水密和气密等优点
- ✓ 不与样品直接接触
- ✓ 避免发生中间焊接的现象

技术规范（说明）

Bag Clip®	80/100	400毫升	3500毫升
每个包装的数量	50个	50个	50个
产品编号	231 010	231 040	231 350

Petri Pile®

型培养皿存放架

PetriPile®型培养皿存放架能够实现安全操作,可同时存放36个培养皿器具。



PetriPile®

适用以下几款尺寸的培养皿：
55毫米、65毫米和90毫米。

技术规范（说明）

PetriPile®	55型	65型	90型
直径	55毫米	65毫米	90毫米
产品编号	241 055	241 065	241 090

- ✓ 可同时存放36个培养皿
- ✓ 可折叠存放
- ✓ 耐高压加热
- ✓ 依据《法国标准化组织协会》NF V08 002标准要求设计产品
- ✓ 全玻璃钢材质铸造


请选择Spiral®螺旋接种方法

一旦完成样品的制备工作，用户必须对培养皿进行接种，目的是进行下一步的微生物分析工作。利用Spiral®全自动式螺旋接种方法，可在一个培养皿上制成所需的全部稀释液，从而对培养皿成功实施接种，此时就无须利用人工电渡方法制造稀释液。



人工电渡方法存在的缺点

这种方法会使用户重复操作此步骤：要想获得一个可读取状态的培养皿，用户至少要制作四次稀释液，同时还须成功完成四次电渡操作。

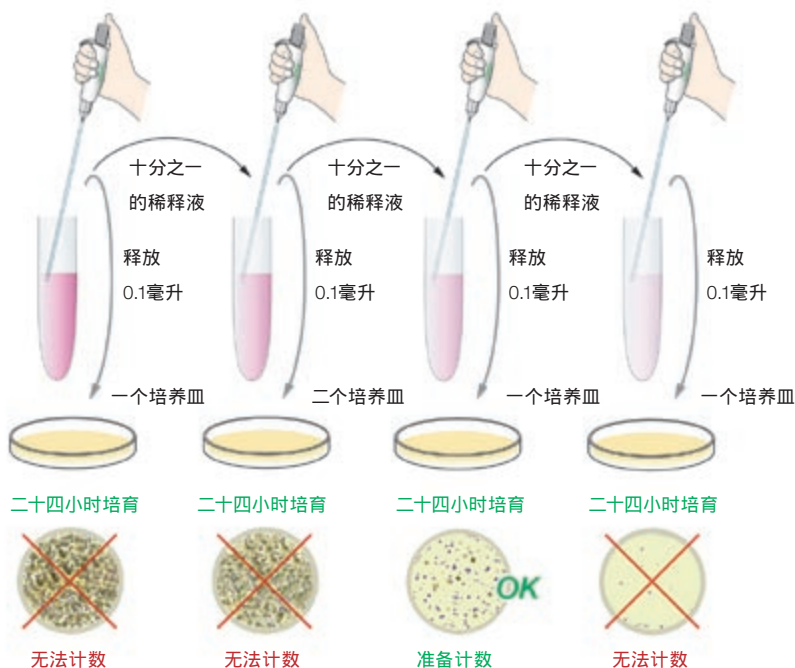

Spiral®方法为全自动操作，且结果准确。

该方法允许用户在一个培养皿中完成所有稀释工作。



第一个培养皿



优点：

- ✓ 仅需一个培养皿
- ✓ 灵敏性强：一个培养皿中细菌落数从200至 4.10^6 CFU/毫升，此时无须对悬浮母液进行初步稀释
- ✓ 与手工方法的全相关关系
- ✓ 能够在培养皿、细菌培养基和吸管中保存剩余物
- ✓ 节约空间
- ✓ 节约时间
- ✓ 符合NF V08-100标准

Spiral® DS+

快速细菌接种仪

Spiral® DS+快速细菌接种仪是一款实验室自动机，主要根据相关标准对细菌培养基皿进行自动电渡，并使细菌群计数工作变得简单。该产品符合《法国标准化组织协会》规定的V08 100标准，能够在培养皿中样品实施细菌计数，每毫升细菌落数计量最高可达至 10^6 。利用Spiral®计数方法，您可以节约宝贵的时间、减少稀释工作次数和可消耗品数量，同时还可获得一个精确的分析结果。

产品应用领域

É
É
É
É

É
É
É
É

MIC

产品规格

É
É
É
É
É
É

90到150毫米
20、50和100微升
200至4.106
8秒
50至70厘米



视频演示网站

www.interscience.fr



最迅捷的计数方法！

产品组件：附件箱、计数栅和1000个无菌烧杯

É 如欲获得有关Spiral®技术规范（说明）的信息，请查看第24页内容

技术规范（说明）

Spiral® DS+	
电源	220/110伏 - 50/60赫兹
尺寸（长x宽x高）	50 x 34 x 37 厘米
产品重量	38 公斤
产品编号	411 000

可选配件



VP400型真空泵
产品编号：525 000



DB50型螺旋型5毫升烧杯
产品编号：415 100
每筒包67个无菌烧杯

- ✓ 百分之百地全自动操作：电渡、取样、消毒及冲洗
- ✓ 操作迅捷（电渡、细菌计数及读出时间）
- ✓ 节约、经济（能够在培养皿、细菌培养基和吸管中保存 剩余物）
- ✓ 结果可复验、可复写。

Scan® 500 & 1200 自动影像分析菌落计数器

Scan® 500 和 Scan® 1200是高科技全自动菌落计数器。内置数码照相机，具有功能强大、操作方便的特点，用户可以将此自动影像分析菌落计数器与电脑连接。产品能够在小于1秒的时间内迅速地为您提供完整、准确、可跟踪的计数结果。

产品应用领域

- 在Spiral®可应用于涂布型、螺旋点样型和倾倒型培养皿
- 可应用于Petrifilm™型微生物检测纸片、RIDA™ COUNT型快速检测板和Sanita- kun® 型检测培养基膜
- 可应用于过滤膜
- 可应用于Compact Dry®型袖珍干燥仪。

产品规格

È CCD真彩照相机，图像可放大或缩小

È
È
È

È Scan®500自动影像分析菌落计数器可检测到的最小菌落直径为0.1毫米

È Scan®1200自动影像分析菌落计数器可检测到的最小菌落直径为0.05毫米

È
È
È
È
È
È

LED
Excel™

- ✓ 软件界面方便，容易操作
- ✓ 高效率：只有一个光标达到最优状态
- ✓ 可跟踪性：可保存每一次计数结果
能够连接至LIMS和条码阅读器
- ✓ 根据细菌培养基定制技术参数
- ✓ 可将数据输出至Excel™
- ✓ 优秀的可重复性和准确性



视频演示网站
www.interscience.fr

产品组件：Scan®软件CD ROM / Firewire PCI卡。

È如欲获得有关Scan技术规范（说明）的信息，请查看第25页内容

技术规范（说明）

Scan®	500	1200
分辨率	640x480	1280x960
电源	220/110伏至50/60	220/110伏至50/60
尺寸（长x高）	27x27x29厘米	27x27x38厘米
重量	6.6千克	8.7千克
产品编号	436 000	437 000

可选配件



条码阅读器
产品编号：
525 000



Petrifilm®型微生物检测纸片专用适配器
产品编号：
436 002



RIDA®COUNT型快速检测板和Sanita- kun®型检测培养基膜专用适配器
产品编号：
436 001



Compact Dry™型微生物检测纸片专用适配器
产品编号：
436 002



Scan® 100

新品

È
È
È
È
È
È

55至150毫米之间

È LED 灯光使用时间长

USB 将数据输出至 PC 和 Mac 电脑


COLOF
DETECTION

[illegible]

3 结果区

可再次检查此前记录的所有数据。

系统配置最低要求：支持Firewire链接（或空闲PCI插槽）的Windows™ XP Vista 1

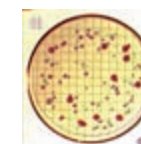

过滤膜

Clinet®

灭菌全系列产品

可对任何目标或设备进行清洗和杀菌。

产品应用领域

È
È
È

Clinet® 404型产品已获得与食品接触的批文



Clinet® 101

洗必泰（双氯苯双胍己烷）葡萄糖酸消毒纸巾

È
È
È
È
È

50% P/P
120张带有预开口的纸巾
13 x 20厘米



Clinet® 202

每袋单独包装的洗必泰（双氯苯双胍己烷）葡萄糖酸消毒擦拭巾装在一个大包装袋内

È
È

旅游和日常打扫卫生设计的理想产品
50% P/P
100小袋擦拭巾
26 x 18厘米



Clinet® 303

杀菌和杀霉型即用喷洒器

È
È

无法接触表面的理想产品

È
È
È

1公升的喷洒瓶



Clinet® 404 SaniFood®

可与食品接触级消毒纸巾

È
È

EN1275及EN1276)
材料进行消毒的产品

È
È
È

45% v/v)
70张纸巾
17 x 20厘米



已获得了与食品接触的批准

技术规范（说明）

Clinet®	101型	202型	303型	404卫生食品型	抗藻型
数量	120张	一袋	1公升	70张	1公升
每盒数	6筒	100袋	6公升	12袋	1公升
产品编号	310 101	310 202	310 303	310 404	310 400

- ✓ 消毒后无需再用清水冲洗
- ✓ 可对所有表面进行清洗和消毒
- ✓ 多用途
- ✓ 低变应原性特点
- ✓ 杀菌、杀霉、杀病毒

Anabac®

型高压锅除臭剂

将Anabac®型产品放在一个高压锅内，您即可在实验内获得一种理智、清香的感觉。

产品应用领域

也不会给高压锅的灭菌功能带来任何不利的影响。



Classic
能够散发出浓郁的香味

È



Poma
苹果型高压锅除臭剂
轻淡的香味
推荐食品使用此类除臭剂

È



Citrus
柠檬型高压锅除臭剂
轻淡的香味
推荐食品使用此类除臭剂

È



Floral
花型高压锅除臭剂
能够散发出浓郁的香味

È



Peach
桃子型高压锅除臭剂
能够散发出浓郁的香味

È

完全生物降解

技术规范（说明）

Anabac®	Classic	Poma	Citrus	Floral	Peach
数量	100	100	100	100	100
产品编号	320 100	320 200	320 300	320 400	320 500

- ✓ 使用舒适
- ✓ 适用于任何型号和类型的高压锅
- ✓ 保证高压灭菌操作的安全
- ✓ 法国香水

Spiral® 螺旋接种仪方法：一个在过去二十五年内被人们广泛应用的方法

"解决方案——节约时间并使操作人在进行螺旋接种时对实验感兴趣。"

Ed Campbell
Spiral®螺旋型方法的发明人



管理局的一名研究员,针对细菌落计数这一日常工作,他成功地设

奎斯是一名物理学家,同时也是interscience公司的缔造者),他们共同改进了螺旋电热操作进程。1992年,人们重新校正了Spiral®螺旋型方法并为其申请了专利。目前,Spiral®螺旋型设备可以保证操作人员进行有效、安全的样品分析。

自动平皿培养法

对于食品、制药和医学微生物领域方面的质量检测而言,计量“活细菌”的菌落形成单位(CFU)是一个中心问题。经过不断努力,全自动平皿螺旋方法可以像手工平皿法一样对活细菌进行电热和计数,但前者在时间、消耗品、空间和步骤等方面所需成本仅为后者的一半。手工方法需要对第三、第四或第五培养皿进行电热以获得一个分析结果,与此相对的是,螺旋方法只需对一个培养皿进行电热,从而减少了连续的稀释操作且实现了即时培育。

螺旋型方法拥有以下几个优势:

È
È
È
È

和可消耗品数量

官方技术

Spiral®螺旋型方法已被美国官方农业化学家协会和法国标准化组织协会V08 100标准认定为检测食品和化妆品生产过程的官方技术。另外,Spiral®螺旋型方法在短时间内也成为了多个应用领域内工作过程的工作性参考标准,如食品微生物、医学细菌学、食品防腐剂研究或美容。

通过超过25年的实践应用,interscience公司已在Spiral®螺旋型方法领域积累了独特的技术和知识,同时研制出最新一代Spiral®型螺旋接种仪,即Spiral®DS+型号的全自动快速螺旋接种仪。



Spiral®螺旋型方法的工作原理:

任何类型的的稀释液都需要在一个培养皿中进行电热操作。由盒子中心开始向四周扩散,以一种对数性的、递减的阿基米德涡[螺旋]线方式操作,并通过精确测量一个旋转的培养皿上的微泵来沉淀样品。根据用户对机器的设置,电热法与按传统方法实施的三或四次稀释过程效果一致。用户可以在培养皿的每一个点上对容量进行校准,同时完全掌握相应情况。当培育过程结束后,细菌群将在沉淀样品的螺旋轨迹上出现。

通过划分分散在培养皿内同一个区域中的细菌群数,用户可以决定细菌的浓度。

用户可以利用一个计数栅手工完成计数工作,亦可利用细菌自动计数仪来自动完成计数工作。

¹美国食品与药物管理局

²按需印刷科学出版物

³美国分析检测组织

⁴法国标准化协会(英文缩写为FSA)

Scan[®] : 型自动影像分析菌落计数仪

“与其它实验相比,微生物分析要求更为严格,为了快速获取精确的结果,必须使用最为理想的计数系统。”

Ed Campbell



高性能

公司研制的Scan[®]型自动影像分析菌落计数仪保证在微生物分析过程中实现高性能、高生产率和可跟踪性。Scan[®]型计数仪内置数码照相机,用户可以通过Scan[®]螺旋软件将此自动影像分析菌落计数仪与电脑连接。产品能够在1秒内对放置在机器内的样品显示7张数码影像。Scan[®] 500型计数仪内置照相机的分辨率为640x480像素,而Scan[®] 1200型计数仪内置照相机的分辨率则达到1280x960像素。通过“放大或缩小”这一功能,您可以极为方便地将数码影像放缩,这样一来,您就可以更为仔细地观察菌落,并能够明显地将它与粒子进行区分。

工作质量与生产率

一旦开始对培养皿进行电热,接下来就会开始一段很漫长且单调乏味的菌群计数工作。自动菌落计数仪在工作质量的程序上有很大的改善而且节约了操作时间,同时又保证操作能够按标准要求实施,最终在极短的时间内获得可靠的结果。

可跟踪性

随时自动地保存所有数据、并将结果Excel

了可跟踪性。借助于机器能够自动记录培养皿图像这一功能,用户无须再长时间地放置培养皿,从而节约了大量空间、时间和精力。机器的这一特点得到了众多实验室的青睐,因此它能够保证实验结果的可靠性和精准度。通过链接一个LIMS或条码阅读器,Scan[®]型自动影像分析菌落计数仪能够提高生产率并实现可跟踪性。

最理想的光源

由于Scan[®]型自动影像分析菌落计数仪应用了多重照明技术,所以


它能够适用于任何类型的细菌培养基和菌落。发光二极管(LED)散发的光亮使得用户在阅读结果时具备了相当大的灵活性,同时又加固了机器的机构。该设备无需进行任何维护。

计数仪在全球范围内获得成功

Scan[®]计数器以扩散表面和螺旋电热的方式对培养皿内的电热菌落进行计数操作,如PCA、VRBG、MRS或BP及过滤膜、Petrifilm[™]AC、Sanitakun[™]/RIDA[™]Count和Compact Dry[®]。由于产品具有广泛的应用范围,因此它在全球获得了极大的认可、被人们广泛使用。



功能强大的软件产品

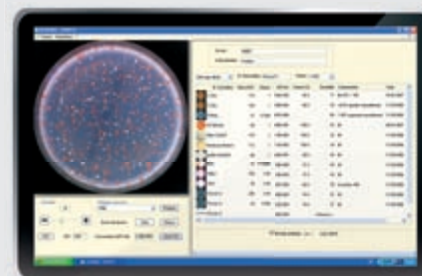

Scan[®]螺旋软件是一款完全由interscience独立研制而成的产品,它在一个窗口内集中了Scan[®]计数仪的所有功能,使用起来更为直观、操作界面极为方便。在软件系统设置了一个高亮的、带有十字叉的可视窗口,用户可以从其中探测菌落。这个十字叉实际是一个光标,它可以优化计数,其定制的配置足以适用于任何类型的细菌培养基。此外,软件还有一个结果区,用户随时可以调阅该区域记录的数据。菌群被自动分离,平底皿上的任何错误均会得到纠正。机器可以在低于1秒的时间内利用一个十字叉将菌落标记出来并完成计数。



Scan[®]软件3.1版本包括彩色检测功能,操作界面友好,能够测出7种不同颜色菌落在同一培养皿上。Scan[®]软件可以创建记录每种颜色并进行记录。

产品规格表



通过托盘订购上述产品可节约资金。

产品	产品编号	销售单位	灭菌次数	公称容积	允许容积	包装盒尺寸	总重
----	------	------	------	------	------	-------	----

BAGFILTER® : 侧边带有过滤膜的均质器专用袋

BagFilter® P 400 (x10)	111 410	500	10	400 毫升	50毫升-300毫升	38 x 23 x 16 厘米	5.2公斤
BagFilter® P 400 (x25)	111 425	500	25	400毫升	50毫升-300毫升	38 x 23 x 16 厘米	5.2公斤
BagFilter® S 400 (x10)	112 410	500	10	400毫升	50毫升-300毫升	38 x 23 x 16 厘米	5.2公斤
BagFilter® S 400 (x25)	112 425	500	25	400毫升	50毫升-300毫升	38 x 23 x 16 厘米	5.2公斤
BagFilter® P 3500	113 510	100	10	3500毫升	200毫升-2000毫升	36 x 25 x 21 厘米	4.2公斤

BAGPAGE® : 型带有全表面过滤膜的均质仪用袋

BagPage® 80	120 825	500	25	80毫升	5毫升-40毫升	34 x 22 x 13 厘米	2公斤
BagPage® 100	121 025	500	25	100毫升	5毫升-50毫升	34 x 22 x 13 厘米	2公斤
BagPage® + 400 (x10)	122 010	500	10	400毫升	50毫升-300毫升	34 x 22 x 13 厘米	6公斤
BagPage® + 400 (x25)	122 025	500	25	400毫升	50毫升-300毫升	34 x 22 x 13 厘米	6公斤
BagPage® F 400	122 325	500	25	400毫升	50毫升-300毫升	34 x 22 x 13 厘米	6公斤
BagPage® R 400	161 025	500	25	400毫升	50毫升-300毫升	34 x 22 x 13 厘米	6公斤
BagPage® U 400	122 225	500	25	400毫升	50毫升-300毫升	34 x 22 x 13 厘米	6公斤
BagPage® 3500	123 010	100	10	3500毫升	200毫升-2000毫升	36 x 25 x 22 厘米	5公斤

BAGLIGHT® : 平底均质器专用袋

BagLight® 100 Polysilk®	131 025	500	25	100毫升	5毫升-50毫升	35 x 24 x 9 厘米	1.4公斤
BagLight® 400 Polysilk®	132 025	1000	25	400毫升	50毫升-300毫升	38 x 22 x 12 厘米	7公斤
BagLight® 400 HD Polysilk®	132 325	1000	25	400毫升	50毫升-300毫升	38 x 22 x 12 厘米	7.2公斤
BagLight® 400 Multilayer®	132 225	500	25	400毫升	50毫升-300毫升	38 x 22 x 12 厘米	5公斤
BagLight® 400 Multilayer® U	132 125	500	25	400毫升	50毫升-300毫升	38 x 22 x 12 厘米	5公斤
BagLight® 3500 Polysilk®	133 025	500	25	3500毫升	200毫升-2000毫升	40 x 30 x 18 厘米	14公斤

ROLLBAG® : 取样均质器专用袋

RollBag® 450	145 010	1000	1	450毫升	5毫升-50毫升	37 x 29 x 12 厘米	3.5公斤
RollBag® 1300	145 040	500	1	1300毫升	50毫升-300毫升	37 x 29 x 12 厘米	3.7公斤

产品	产品编号	销售单位	产品规格	包装盒尺寸	总重
----	------	------	------	-------	----

BABYGRAVIMAT® : 全自动重量稀释器

BabyGravimat®	500 230	1	自动 (重量) 稀释器单泵	47 x 47 x 38 厘米	12公斤
BabyGravimat®双泵	502 230	1	自动 (重量) 稀释器双泵	47 x 47 x 38 厘米	13公斤

BABYGRAVIMAT® 机器配件

打印机	521 000	1	热敏印刷机 + 2个打印机辊		
打印机标签	521 012	2	热敏印刷机标签专用辊		
“法国授权委员会”规定的500重量	513 005	1	“法国授权委员会”认证的1500克级重量单位		

产品	产品编号	销售单位	产品规格	包装盒尺寸	总重
空气过滤器	513 007	1	0.2微米的聚四氟乙烯耐高压加热过滤器		
实验用瓶	513 001	1	5公升耐高压加热实验用瓶		
分配装配器	513 003	1	一套实验用管 + 钢管 + 过滤器 + 连接器 + 连接线		
硅胶管	513 004	1	共5套分配用硅胶管		
泵用硅胶管	513 011	1	共计5个软管泵用硅胶管（每个硅胶管长为20厘米）		
BagOpen® 400	514 040	1	BabyGravimat®用400毫升袋用开袋器/夹袋器		
分配平台	513 012	1	分配用圆底称重平台		
双袋用内置支架	513 013	1	二个稀释袋用的、内置汤袋支架		
双袋用支架	513 015	1	二个稀释袋用的、独立式汤袋支架		
可调节的支臂	513 014	1	与另一个容器协同使用		
GRAVIMAT® :型自动（重量）稀释器					
GRAVIMAT®	510 230	1	GRAVIMAT® 型自动（重量）稀释器单泵	54 x 39 x 36厘米	13公斤
GRAVIMAT®双泵型	512 230	1	GRAVIMAT® 型自动（重量）稀释器双泵	54 x 39 x 36厘米	15 公斤
GRAVIMAT® 机器配件					
推进器	511 000	1	推进器 + 分配装配器		
打印机	521 000	1	打印机 + 2个辊		
自粘标签辊	521 012	2	热敏打印机用辊		
热敏打印机用辊	521 110	2	热敏打印纸用辊		
条码阅读器	522 000	1	第码阅读器		
500克校准重量	513 005	1	“ 法国授权委员会 ” 认证的500克F1级重量单位		
实验用瓶	513 001	1	5公升耐高压加热实验用瓶		
小型均质仪用袋支架	514 001	1	80/100毫升均质仪用袋专用支架和底座		
空气过滤器	513 007	5	0.2微米聚四氟乙烯而高压加热过滤器		
推进器用分配装配器	513 006	1	硅胶管 + 不锈钢管 + 过滤器 + 喷嘴		
推进器用小型分配装配器	513 008	1	小型硅胶管 + 不锈钢管 + 过滤器 + 喷嘴 + “ Y ” 形器		
分配装配器	513 003	1	硅胶管 + 不锈钢管 + 过滤器 + 喷嘴		
推进器用小型硅胶管	513 009	1	5个小型分配管 + “ Y ” 形器		
推进器用硅胶管	513 010	1	5个分配管 + “ Y ” 形器		
硅胶管	513 004	1	5个分配管		
分配臂	513 002	1	用于气流室内的操作程序		
BagOpen® 400	514 040	1	Gravimat®400毫升用袋专用支架		
BagOpen® 100	514 010	1	Gravimat®100毫升用袋专用支架		
分配平台	513 012	1	分配用圆底称重平台		
泵用硅胶管套装件	513 011	1	共计5个软管泵用硅胶管（每个硅胶管长为20厘米）		
汤袋用Gravimat型支架	513 013	1	汤袋用集成式支架		
汤袋用支架	513 015	1	汤袋用独立式支架		

产品	产品编号	销售单位	产品规格	包装盒尺寸	总重
BAGMIXER® : 型实验室均质仪					
MiniMix® 100 * : 型100毫升实验室均质仪					
MiniMix® 100 VP	011 230	1	平面门, 速度可调整	50 x 30 x 33厘米	10.5公斤
MiniMix® 100 VW	012 230	1	窗式门, 速度可调整, 配有安全滴水盘	50 x 30 x 33厘米	10.5公斤
BagMixer® 400 * : 型 400毫升 实验室均质仪					
BagMixer® 400 P	021 230	1	平面门	49 x 34 x 36厘米	20公斤
BagMixer® 400 W	022 230	1	可视窗门, 配有安全滴水盘	49 x 34 x 36厘米	20公斤
BagMixer® 400 VW	023 230	1	可视窗门, 速度和叶片可调整, 配有安全滴水盘	49 x 34 x 36厘米	20公斤
BagMixer® 400 CC®	024 230	1	可视窗门, 速度和叶片可调整, 配有安全滴水盘, 叶片为可拆除、而高压加热型	49 x 34 x 36厘米	20公斤
JumboMix® 3500 * : 型3500毫升实验室均质仪					
JumboMix® 3500 P	031 230	1	平面门, 速度和叶片可调整	60 x 50 x 50厘米	60公斤
JumboMix® 3500 VW	032 230	1	可视窗门, 速度和叶片可调整, 配有安全滴水盘	60 x 50 x 50厘米	60公斤
JumboMix® 3500 WarmMix®	033 230	1	平面门, 速度和叶片可调整, 温度最高可调整至50摄氏度	60 x 50 x 50厘米	61公斤
* 叶片可调整 (专利产品), 产品组件还包括BagFilter®型均质仪样品包					
BAGTOOLS® :型实验室配件					
BagOpen® 80/100	211 010	1	100毫升专用袋开袋器	90 x 40 x 190厘米	0.6公斤
BagOpen® 400	211 040	1	400毫升专用袋开袋器	97 x 78 x 250厘米	0.7公斤
BagOpen® 3500	211 350	1	3500毫升开袋器/夹袋器	320 x 170 x 360厘米	1.5公斤
BagPipet®	251 019	1	固定容量的而高压加热管: 0.1毫升 - 0.9毫升 - 1毫升, 带BagTips®	31 x 10 x 6厘米	0.3公斤
BagTips®	252 019	1000	经过二十五次灭菌处理的无菌硬质吸管 (长19厘米)	27 x 23 x 12厘米	1.2公斤
BagTips® Jumbo	252 024	1000	经过二十五次灭菌处理的无菌硬质吸管 (长24厘米)	28 x 23 x 12厘米	1.5公斤
BagRack® 80/100	221 010	1	11袋用可折叠式不锈钢存储架	28 x 15 x 16厘米	1公斤
BagRack® 400	221 040	1	10袋用可折叠式不锈钢存储架	36 x 23 x 22厘米	1.4公斤
DripTray BagRack®	221 042	5	BagRack® 400型不锈钢安全滴水盘	36 x 22.4 x 3厘米	925克
DripTray BagMixer® 400	026 000	1	BagMixer® 400型不锈钢安全滴水盘	23 x 12 x 1.6厘米	325克
BagRack® 3500	221 350	1	4袋用可折叠式不锈钢存储架	50 x 41 x 42厘米	3.5公斤
BagClip® 80/100	231 010	50	80/100毫升袋用封口夹		0.6公斤
BagClip® 400	231 040	50	400毫升袋用封口夹		0.8公斤
BagClip® 3500	231 350	50	3500毫升袋用封口夹		1.5公斤
PetriPile® 55	241 055	1	36055毫米培养皿用不锈钢存放架	32 x 23 x 16厘米	1公斤
PetriPile® 65	241 065	1	36065毫米培养皿用不锈钢存放架	33 x 23 x 17厘米	1公斤
PetriPile® 90	241 090	1	36090毫米培养皿用不锈钢存放架	39 x 28 x 15厘米	1.5公斤
BagSeal® 400	261 000	1	热敏密封设备	34 x 29 x 27厘米	10.5公斤

产品	产品编号	销售单位	产品规格	包装盒尺寸	总重
SPIRAL® SYSTEM : 螺旋系统 : 螺旋接种仪					
Spiral® DS+	411 000	1	自动接种仪	63 x 42 x 42厘米	40公斤
Spiral® DS+、真空泵、VP400及配件箱				115 x 55 x 55厘米	60公斤
VP400型真空泵	415 200	1	真空泵、细颈瓶及压力计	35 x 30 x 20厘米	7公斤
VP400型修理包	415 212	1	隔板、气阀、螺旋钉及螺栓		
DB 50型螺旋烧杯	415 100	1	螺旋均质仪用无菌烧杯	31 x 23 x 9厘米	1.4公斤
清洁消毒液	415 510	1	螺旋均质仪DET500用清洁剂,		
紫色染料	415 530	1	螺旋均质仪用紫色		
活塞润滑剂	415 540	1	螺旋棒用润滑剂		
清洁酸	415 520	1	螺旋均质仪用清洁酸		
SCAN® : 型自动菌落计数仪					
Scan® 100	435 000	1	菌落记数	31 x 25 x 17厘米	5,2公斤
Scan® 500	436 000	1	自动菌落计数仪	47 x 37 x 34厘米	10公斤
Scan® 1200	437 000	1	高分辨率自动菌落计数仪	39 x 36 x 54厘米	12公斤
PetriFilm®型适配器	436 002	1	Petrifilm®型适配器		
RIDA® count/ Sanita- kun®型适配器	436 001	1	Sanita- kun®型适配器		
Compact Dry™ 型适配器	436 004	1	Compact Dry™ 型适配器		
55 mm培养皿	436 005	1	55 mm培养皿		
放大镜 & 可调节作用	435 001		放大镜 & 可调节支架专为Scan® 100		
螺旋试剂盒	435 010		传播的背景为记数网络		
CLINET® : 消毒剂					
Clinet® 101	310 101	6	一个内装120张消毒纸巾的分配器	26 x 18 x 18厘米	2公斤
Clinet® 202	310 202	100	每个包内装有消毒纸巾	26 x 22 x 11厘米	1.5公斤
Clinet® 303	310 303	6	3个板柄	28 x 19 x 28厘米	6.5公斤
Clinet® 404 Sanifood®	310 404	12	可与食品接触级分配器, 内装70张纸巾	39 x 30 x 18厘米	4.5公斤
Clinet® Anti-algues	310 400	1	藻类生物生长抑制液		1.2公斤
ANABAC® : 型高压锅除臭剂					
Anabac® Classic经典桉树型	320 100	1	每盒装100个颗粒 (香味类型: 薄荷/桉树味)		160克
Anabac® Poma苹果型	320 200	1	每盒装100个颗粒 (香味类型: 苹果味)		160克
Anabac® Citrus柠檬型	320 300	1	每盒装100个颗粒 (香味类型: 柠檬味)		160克
Anabac® Floral花型	320 400	1	每盒装100个颗粒 (香味类型: 花味)		160克
Anabac® Peach桃子型	320 500	1	每盒装100个颗粒 (香味类型: 桃子味)		160克
BIOPARFUM® : 型气味中和剂					
BioParfum® 111	350 111	4	250毫升喷洒型除臭剂	26 x 17 x 11厘米	1.4公斤
BioParfum® 333	350 333	2	11罐浸渍颗粒	26 x 22 x 11厘米	1.3公斤

技术帮助服务

您可以立即获得interscience提供的技术帮助服务。公司职员将每周七天、每天二十四小时向您提供技术建议、产品信息和应用知识。



- È 技术建议
- È 电话帮助
- È 设置操作
- È 特殊训练
- È 联系维护服务
- È 现场技术维护

热线 : +33 (0)1 30566401

电子信箱 : tech@interscience.fr

www.interscience.fr

请关注公司的相关信息和最新产品！



您也可以轻松地公司的网站中下载您所需的资料和信息：

- È 视频、动画和图片资料
- È 宣传手册、技术资料和公司新闻
- È Scan®型螺旋软件试用版
- È 服务保证确认
- È 支持及技术帮助
- È 信息要求及定货单

Information in this catalog is not contractually binding.

interscience registered trademark : Agartop®, Inoxidol®, Acalcar®, Cobac®, Stomafilter®, Interscience®, Bagfilter®, Clinet®, Gravimat®, Anabac®, Scan®, BagRack®, BagClip®, Ensemenceur Spiral®, Sembrador Spiral®, Spiral® Plater, BagSystem®, Bagopen®, Bagporter®, Interlab®, Polyfill®, Biobox®, Coldbox®, Biowaste®, Bagseal®, Bagpipet®, Bagtips®, Bioparfum®, Bagmixer®, Polysilk®, Handyspray®, malaxeur Minimix®, malaxeur maxiMix®, Blender, CoolMix®, Bagholder®, Bagpage®, jumboMix®, WarmMix®, BiBagTribag®, Multibag®, iBag®, iMix®, iNews®, iSystem®, iTools®, Labo M Microbiology®, Microbiology World®, BagBlender®, Blender Bag®, BagMixer® Crocodile, (Easy EZ Spiral)®, BagLight®, BagLight UniversalStandard®, BagPage Universal Standard®, Scan Protocol®, Spiral®, Systeme Spiral®, BagTools®, Petripile®, Baglite®, BagControl®, Interfarm®, Pickup Bag®, BagPickup®, Sanifood®, Interfarma®, Easy EZ Bag®, Rollbag®, Interbio®, Polysill®, Click and Clean®, Formula 1 F1®, Easy Cleaning System ECS®.

如何订购公司产品

interscience

法国及国际客户

30, ch. du Bois des Arpents

78860 St Nom FRANCE

联系电话: +33 (0)1 34626261

传真: +33 (0)1 34624303

电子信箱: info@interscience.fr

公司网站: www.interscience.fr

interscience

China

上海市淮海西路343号鑫城苑K座1306室

邮编: 200030

联系电话: 021 52541629

传真: 021 52541529

电子信箱: sales.china@interscience.fr

公司网站: www.interscience.fr

公司遍布全球的物流服务网络



在全球范围内即时送到产品



通过托盘订购上述
产品可节约资金。

interscience

我希望订购如下产品:

请与我联系并将如下信息发送给本人

产品报价

技术顾问提供产品演示

公司派驻当地的物流服务联系人

产品技术文档:

本人联系方式:

姓名

公司

住址

邮编

国籍

联系电话

传真

电子信箱

网站

请将此表格传真至以下地址:

+86(0) 21 54903638 (interscience China)

+33(0) 1 34624303 (interscience 法国总公司)

interscience

微生物行业的世界领头羊

interscience 法国总公司

联系电话: +33 (0)1 34626261

传真: +33 (0)1 34624303

电子信箱: info@interscience.fr

公司网站: www.interscience.fr

30, ch. du Bois des Arpents 78860 St Nom France

interscience 中国

联系电话: 021 542541629

传真: 021 52541529

电子信箱: sales.china@interscience.fr

公司网站: www.interscience.net.cn

上海市淮海西路343号鑫城苑K座1306室

邮编: 200030

当地代理商

www.interscience.net.cn

CN

法国奥弗涅研发中心

